



# CLINODENT TRIO KIT SBIANCANTE ANTITARTARO

## ISTRUZIONI PER L'USO

### CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

1 specchio dentale - 1 strumento levatartaro - 1 stick sbiancante


### INDICAZIONI

Accumuli di placca e tartaro sui denti.

CLINODENT Sbiancante Antitartaro è un prodotto studiato per la pulizia e la rimozione dalle superfici dei denti di placca e tartaro, aiuta a combattere gengiviti e a pulire le macchie. La rimozione meccanica del tartaro dai denti è una pratica molto importante che deve essere effettuata con regolarità per prevenire la gengivite, infiammazione e possibile infezione della gengiva che si gonfia ed arrossa.

L' utilizzo settimanale dello stick sbiancante, unito al normale uso di spazzolino e dentifricio, elimina efficacemente la placca dentale grazie all' azione pulente della gomma, contribuendo così a prevenire lo sviluppo della carie.

Passando lo Stick Sbiancante sui denti si possono anche eliminare le macchie sgradevoli e l' ingiallimento causato da tabacco, the, caffè, coloranti alimentari etc., ridonando candore e splendore naturale ai vostri denti.

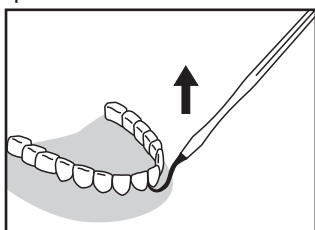

### MODO D'USO

- Lavare i denti con spazzolino e dentifricio.
- Con lo specchio dentale osservare la parte interna dei denti ed in caso di presenza di placca e tartaro procedere all' utilizzo del prodotto.
- Impugnare lo strumento levatartaro come se fosse una penna.
- Posizionare la punta curva dello strumento tra la superficie dei denti e la linea della gengiva.
- Raschiare dalla linea gengivale verso la parte

alta del dente esercitando una moderata pressione per rimuovere il tartaro.

- Ripetere l' operazione sulla parte interna ed esterna di tutti i denti.
- Sciacquare la bocca dopo ogni operazione meglio con un collutorio disinfettante.
- Sciacquare la gomma dello Stick.
- Lucidare i denti con lo Stick Sbiancante sia sulla superficie anteriore che posteriore, muovendolo verticalmente con una leggera pressione.
- Lavare i denti con spazzolino e dentifricio.

### AVVERTENZE

- L' uso di CLINODENT trio è riservato agli adulti; non usare il prodotto sui bambini.
- Seguire attentamente le istruzioni.
- Non ingerire il materiale rimosso: la placca batterica contiene batteri che, se introdotti nella circolazione sanguigna, possono aggravare complicanze sistemiche.
- Pulire gli strumenti dai residui di placca e tartaro durante il trattamento.
- Dopo l' uso lavare gli strumenti con acqua calda e sapone.
- Le gengive potrebbero sanguinare dopo una prima pulizia del tartaro.
- Se il sanguinamento della gengiva dovesse continuare, interrompere il trattamento e consultare il proprio dentista.
- In seguito alla pulizia del tartaro i denti potrebbero essere piu' sensibili, tale sensazione termina dopo qualche settimana dal trattamento.
- Usare lo Stick fino all' esaurimento della parte conica (4mm circa), per non scoprire il supporto interno.
- L' uso successivo dello Stick deve essere limitato ad una volta per settimana.
- Non esercitare eccessiva pressione sulla superficie dei denti.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

FIMO srl

via Edolo, 40 20125 Milano - Italia - [www.fimosrl.it](http://www.fimosrl.it)

MADE IN ITALY



A 9 3 0 8 8 2 9 3 9