

LOT



CLINODENT XL SISTEMA SBIANCANTE ANTIPLACCA

Clinodent® è un nuovo sistema rotativo a pile per l'igiene dentale, che consente in modo semplice e rapido di ritrovare un sorriso smagliante.


Clinodent®, come gli apparecchi professionali, consente di rimuovere efficacemente la placca dentale (causa riconosciuta di gravi problemi come il tartaro, carie, piorrea, etc.) svolgendo contemporaneamente un'importante azione sbiancante, con la rimozione di macchie provocate da agenti esterni (fumo, caffè, tè, etc). L'uso combinato della pasta lucidante e del movimento rotatorio della sua speciale testina di gomma, unito al quotidiano impiego dello spazzolino e del dentifricio, permette un'efficace igiene orale ed un'utile azione preventiva delle malattie dentali.

COME INSERIRE LE BATTERIE

Svitare la parte cilindrica in metallo, introdurre 2 pile da 1,5v con il polo positivo (+) verso l'alto, quindi riavvitare.

MODO D'USO

- Riempire l'interno della testina in gomma di Pasta Sbiancante Clinodent®.
- Applicare una piccola quantità di Pasta Sbiancante Clinodent® direttamente sui denti utilizzando le dita o la testina stessa.

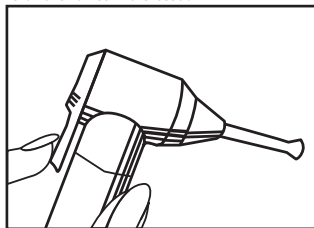

- Appoggiare la testina sui denti e attivare l'apparecchio premendo la levetta posteriore. Azionare il dispositivo solo quando è all'interno del cavo orale.
- Eseguire lenti movimenti circolari esercitando una leggera pressione per due o tre secondi su ogni dente.
- Per motivi di sicurezza la rotazione s'interrompe quando la pressione è troppo elevata.
- Terminata l'operazione sciacquare la bocca con acqua corrente e richiudere il tubetto di Pasta Sbiancante Clinodent®.

FREQUENZA DI UTILIZZO

Utilizzare l'apparecchio non più di due volte al mese.

MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Dopo ogni utilizzo staccare la testina di gomma e lavarla con acqua corrente. Pulire l'apparecchio con un panno morbido.

IMPORTANTE: NON IMMERGERE L'APPARECCHIO IN ACQUA.



GARANZIA: 12 MESI - FUNZIONA CON 2 BATTERIE AA DA 1,5V NON INCLUSE.

INGREDIENTI DELLA PASTA SBIANCANTE CLINODENT®

Sorbitol, Calcium Carbonate, Aqua, Solum Diatomeae, Propylene Glycol, Cellulose Gum, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, Sodium Phosphate, Silica, Sodium Benzoate, Xanthan Gum, Aroma.



È possibile applicare la Pasta Sbiancante Clinodent® settimanalmente sullo spazzolino per mantenere il bianco naturale dei vostri denti.

I MATERIALI DI CONSUMO SONO DISPONIBILI NELLA CONFEZIONE CLINODENT® RICARICA CONTENENTE DUE TESTINE IN GOMMA E UN TUBETTO DI PASTA SBIANCANTE PER DENTI CLINODENT®.

AVVERTENZE

L'uso di Clinodent® non sostituisce il controllo regolare del vostro dentista.
Non usare il prodotto su bambini al di sotto dei 12 anni.

FIMO srl
via Edolo, 40 20125 Milano - Italia
www.fimosrl.it



A 930882941