

CLINODENT IL PULISCILINGUA PREVIENE E RIDUCE L'ALITOSI

L'alitosi è una condizione in cui l'alito che fuoriesce dal cavo orale è caratterizzato da un odore sgradevole. Ciò può causare imbarazzo, difficoltà nella vita di relazione e, ad alcune persone, problemi psicologici anche gravi.

Studi clinici dimostrano che oltre il 90% dei casi di alito pesante si verificano per l'accumulo di batteri nella cavità orale. Infatti, il cattivo odore emanato dalla bocca è dovuto alla presenza di residui alimentari che vanno incontro a fermentazione a causa dell'azione dei batteri che risiedono nella bocca. Questi batteri producono i composti volatili solforosi (VSCs), che sono la causa dell'alitosi.

Clinodent il Puliscilingua è l'ultima evoluzione nella tecnologia della freschezza dell'alito. Per mantenere un'accurata igiene orale occorrono: spazzolino da denti, filo interdentale (o idropulsore), collutorio e Clinodent il Puliscilingua che rimuove i batteri presenti sulla lingua.

INDICAZIONI

Igiene quotidiana del cavo orale.


Prevenzione dell'alitosi derivata dall'accumulo di placca batterica sulla lingua.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Lavare accuratamente i denti in modo da eliminare ogni residuo di cibo.
2. Estendere la lingua. Appoggiare sulla parte posteriore della lingua Clinodent il Puliscilingua. Tirare verso l'esterno mentre si pressa leggermente verso il basso. Eseguire questa operazione per 5 o 6 volte, sciacquando Clinodent il Puliscilingua dopo ogni passata.

Importante: sciacquare Clinodent il Puliscilingua ogni volta che si termina una singola passata sulla lingua.

3. Finita l'operazione, risciacquare Clinodent il Puliscilingua con acqua calda e riporlo come lo spazzolino da denti.

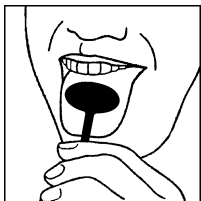

Utilizzare regolarmente Clinodent il Puliscilingua 2 o 3 volte al giorno.

Sostituire Clinodent il Puliscilingua ogni tre mesi.

Se l'alito cattivo persiste, rivolgersi al proprio dentista.

Non utilizzare su bambini sotto i 6 anni.

ELIMINA GLI ODORI PRODOTTI DALLA LINGUA

INDISPENSABILE PER L'IGIENE ORALE

CONTRIBUISCE A RIDURRE L'ACCUMULO DI BATTERI NELLA BOCCA

FIMO srl
via Edolo, 40 20125 Milano - Italia
www.fimosrl.it



A906771670